

人と環境に確かな安心を
医療・理化学用洗浄剤、検査材料カタログ



日本メディポート株式会社

JAPAN MEDI PORT

セルライン・HA-D

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
01116	20kg	¥18,000	1
05021	2kg	¥2,000	10

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ピペッターノズル、ラインの洗浄に使用。
主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・HG-SS

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05032	1kg	¥8,000	5

用途・特徴／自動分析装置の恒温槽、セルの洗浄に使用。
主 成 分／2-アミノエタノール、ホルムアルデヒド
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・AC-200

●酸性液体

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05029	500ml	¥3,000	10

用途・特徴／自動分析装置のアルカリで落ちない汚れに使用。
主 成 分／しゅう酸、メタノール
※塩素系薬品、洗浄剤との混合は、避けて下さい。
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・BI-K

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05059	500ml	¥2,000	12
05060	2kg	¥4,100	6
05024	4kg	¥8,000	4
01123	10kg	¥20,000	1

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ライン、ノズルの洗浄に使用。
主 成 分／水酸化ナトリウム
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・C

●アルカリ性液体(無リン)
PH11.5±0.5

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05042	1kg	¥7,000	5
05043	500ml	¥2,000	12

用途・特徴／自動分析装置セルの浸漬用洗浄剤。
主 成 分／非イオン界面活性剤
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・BM

●アルカリ性液体(無リン)
PH原液12.3±2

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05061	4kg	¥5,000	4
05062	20kg	¥22,000	1

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ノズル、ラインの洗浄に使用。
主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。



セルライン・BM5 セルライン・HA-D

セルライン・CH-200

●アルカリ性液体 塩素系
PH11.5±0.5

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05027	4kg	¥6,000	4

用途・特徴／自動分析装置のノズル、サンプルカップ、ラインの洗浄に使用。
主 成 分／次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
※酸性薬品、洗浄剤との混合は、避けて下さい。
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・MP

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05067	500ml	¥2,400	12
05066	10kg	¥33,000	1

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ライン、ノズルの洗浄に使用。
主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・AC3

●酸性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05028	500ml	¥3,000	12

用途・特徴／自動分析装置のアルカリで落ちない汚れに使用。
主 成 分／しゅう酸、メタノール
※塩素系薬品、洗浄剤との混合は、避けて下さい。
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・BM5

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05072	4kg	¥5,000	4

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ノズル、ラインの洗浄に使用。
主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤
使 用 法／各機種の使用法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・BM30

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05071	4kg	¥7,300	4
05070	20kg	¥30,000	1

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ノズル、ラインの洗浄に使用。

主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・BM7

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05080	4kg	¥9,000	4

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ノズル、ラインの洗浄に使用。

主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・SC

●弱酸性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05063	2kg	¥7,000	6

用途・特徴／自動分析装置に使用するセルのコンディショナーとして使用します。

主 成 分／非イオン界面活性剤

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・ND5

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05090	20kg	¥13,000	1

用途・特徴／自動分析装置の反応セル、ノズル、ラインの洗浄に使用。

主 成 分／水酸化ナトリウム、非イオン界面活性剤

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・TA-C

●酸性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05112	4kg	¥6,000	4
05109	20kg	¥27,000	1

用途・特徴／自動分析装置セルの浸漬用洗浄剤。

主 成 分／非イオン界面活性剤

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・CH-100

●アルカリ性液体(塩素系)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
01132	100ml	¥10,000	1

用途・特徴／自動分析装置の反応ラインの洗浄に使用。

主 成 分／次亜塩素酸ナトリウム

※酸性との混合は絶対に避けて下さい。

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。



セルライン・CH-100 セルライン・CA-100Y

セルライン・SC5

●弱酸性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05092	200ml	¥4,000	10

用途・特徴／自動分析装置に使用するセルのコンディショナーとして使用します。

主 成 分／非イオン界面活性剤

使 用 法／10倍希釈でご使用下さい。

セルライン・TA-L

●アルカリ性液体(無リン)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05111	4kg	¥6,000	4
05108	20kg	¥26,000	1

用途・特徴／自動分析機のノズル、ラインの洗浄に使用します。

主 成 分／アルカリ剤、非イオン界面活性剤

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

セルライン・CA-100Y

●アルカリ性液体(塩素系)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
00193	50ml×6	¥13,000	1

用途・特徴／自動分析装置のノズル、ラインの洗浄に使用します。

主 成 分／次亜塩素酸ナトリウム

※酸性との混合は絶対に避けて下さい。

使 用 法／各機種の使用方法に応じて調整し、ご使用下さい。

Category 2

特殊洗浄剤 スラッシュ・シリーズ

スラッシュ・O

●環境分析用洗浄剤
PH10.8±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
00310	4kg	¥8,000	4

用途・特徴／非イオン界面活性剤を使用していないので、水質・環境分析等の器具洗浄に安心して使用できます。

主 成 分／水酸化ナトリウム、陰イオン界面活性剤

使 用 法／浸漬洗浄 2%~5%(10Lの水に200~500ml)

スラッシュ・CP

●弱アルカリ性液体(無リン)
PH9.0±0.5(5%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05015	4kg	¥6,000	4

用途・特徴／手術用具の潤滑防錆剤。メス、ピンセットなどの器具の保護に。

主 成 分／グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル

使 用 法／使用濃度 5%~10%(10Lの水に500~1000ml)

希釈液に、洗浄剤の器具を15秒~30秒浸漬後乾燥させます。

ノンバクト・CA

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05038	4kg	¥9,000	4

用途・特徴／血液等を扱う器具、実験台、作業台、床、壁、他細菌に汚染されやすい箇所の除菌清掃に。

主 成 分／CAE、陽イオン界面活性剤、エタノール

使 用 法／原液を布で塗布・拭拭するか、噴霧して下さい。

スラッシュ・Bi-S

●アルカリ性液体 防錆剤配合
PH11.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05010	4kg	¥6,000	4
01135	20kg	¥25,000	1

用途・特徴／超音波洗浄機、浸漬洗浄、両方に使用できます。

汚れの対象／血液、蛋白、脂肪、マジックインキ、重金属、ラジオアイソトープ、他

主 成 分／水酸化カリウム、非イオン界面活性剤、洗浄助剤

使 用 法／超音波洗浄 0.5%~1%(10Lの水に50~100ml)

浸漬洗浄 3%~5%(10Lの水に300~500ml)

スラッシュ・LO

●アルカリ性液体 防錆剤配合
PH11.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05011	4kg	¥5,700	4
01141	20kg	¥24,000	1

用途・特徴／低泡性のすすぎの楽な超音波洗浄機用洗浄剤です。

汚れの対象／血液、蛋白、脂肪、マジックインキ、重金属、ラジオアイソトープ、他

主 成 分／水酸化カリウム、非イオン界面活性剤、洗浄助剤

使 用 法／超音波洗浄 0.5%~1%(10Lの水に50~100ml)

スラッシュ・JW

●アルカリ性液体(無リン)
PH11.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05013	4kg	¥6,000	4
01145	20kg	¥25,000	1

用途・特徴／噴射型、超音波洗浄機兼用の洗浄剤です。

汚れの対象／血液、蛋白、脂肪、マジックインキ、重金属、他

主 成 分／酸化カリウム、有機溶剤、洗浄助剤

使 用 法／超音波洗浄 0.5%~1% 噴射型洗浄 0.2%~0.5%

ウォッシュステライザー 0.2% チューブ/スリッパ洗浄機0.5%

スラッシュ・JW-N

●酵素系中性液体(無リン)
PH8.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05012	4kg	¥6,500	4
01143	20kg	¥29,000	1

用途・特徴／アルカリに弱い器具の超音波洗浄と浸漬洗浄に。

汚れの対象／アルミカップをはじめ、アルカリに弱い器具

主 成 分／プロパノール、非イオン界面活性剤、蛋白分解酵素

※製品の性質上、沈殿物が生じる場合があります。

緩やかに転倒混和してご使用ください。

使 用 法／超音波洗浄 0.5%~1%(10Lの水に50~100ml)

浸漬洗浄 3%~5%(10Lの水に300~500ml)



スラッシュ・JW スラッシュ・JW-N スラッシュ・CP

メディパック・W-M

●2重式

商品コード	サイズ	数量	定 価
04002	500mm×720mm	200枚	¥45,000

スラッシュ・AL

●アルカリ性液体(無リン)
PH11.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05001	4kg	¥ 6,000	4
00312	20kg	¥ 27,000	1

用途・特徴／汚れのひどい器具に優れた洗浄力を発揮します。
 汚れの対象／血液、脂肪、蛋白、マジックインキ、パラフィン、ラジオアイソトープ、シリコンオイル、他
 主 成 分／水酸化カリウム、界面活性剤、洗浄助剤
 使 用 法／浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)
 2～24時間浸漬後よく水洗いして下さい。

スラッシュ・CA

●アルカリ性液体(無リン)
PH11.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05002	4kg	¥ 7,500	4
00322	20kg	¥ 34,000	1

用途・特徴／CAE(HB抗原不活化剤)配合の除菌洗浄剤。
 汚れの対象／生化学、血液、血清、などウィルスに汚染されたガラス、プラスチック器具、メス、ピンセット、他
 主 成 分／CAE、水酸化カリウム、界面活性剤、洗浄助剤
 使 用 法／浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)
 2～24時間浸漬後よく水洗いして下さい。

スラッシュ・CA-II

●アルカリ性液体(低泡性)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05009	4kg	¥ 7,500	4
00324	20kg	¥ 34,000	1

用途・特徴／CAE(HB抗原不活化剤)配合洗浄剤。
 超音波洗浄機、浸漬洗浄に使用できます。
 汚れの対象／ウィルスに汚染されたガラス、プラスチック、メス、ピンセットなどの器具、器材
 主 成 分／CAE、水酸化カリウム、非イオン界面活性剤、洗浄助剤
 使 用 法／超音波洗浄機 0.5%～1%(10Lの水に50～100ml)
 浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)

スラッシュ・NE

●酵素系液体(無リン)
PH中性(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05003	4kg	¥ 5,400	4
00332	20kg	¥ 23,000	1

用途・特徴／蛋白質系の汚れや、強アルカリに弱い器具に最適。
 汚れの対象／石英セル、ビベット、バイレックス製品、光学部品、血液、ガス分析装置
 主 成 分／ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、2-プロパノール、蛋白分解酵素、洗浄助剤
 ※製品の性質上、沈殿物が生じる場合があります。
 緩やかに転倒混和してご使用下さい。
 使 用 法／浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)
 2～24時間浸漬後よく水洗いして下さい。

スラッシュ・AC

●酸性液体
PH11.5±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05004	4kg	¥ 6,400	4
00442	20kg	¥ 30,000	1

用途・特徴／アルカリタイプで落ちない汚れに最適。
 汚れの対象／水アカ、重金属、金属イオン、電解質、微量分析、石灰分の除去、アルカリの中和剤、他
 主 成 分／稀酸、非イオン界面活性剤
 ※塩素系との混合は絶対に避けて下さい。
 使 用 法／浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)
 2～24時間浸漬後よく水洗いして下さい。

スラッシュ・CH

●アルカリ性液体(塩素系)
PH12.0±0.5(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05005	4kg	¥ 6,000	4
00552	20kg	¥ 27,000	1

用途・特徴／次亜塩素酸ナトリウム配合の除菌洗浄剤。
 汚れの対象／生化学、血液、血清、などウィルスや細菌に汚染されたガラス及びプラスチック器具
 主 成 分／水酸化カリウム、非イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム
 ※酸性との混合は絶対に避けて下さい。
 使 用 法／浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)
 2～24時間浸漬後よく水洗いして下さい。

スラッシュ・NS

●酵素系液体(無リン)
PH中性(2%液)

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05006	4kg	¥ 8,400	4
00669	20kg	¥ 34,000	1

用途・特徴／CAE(HB抗原不活性化剤)配合の除菌洗浄剤。
 汚れの対象／石英セル、ビベット、バイレックス製品など、アルカリに弱い器具や、内視鏡その他の除菌洗浄に
 主 成 分／CAE、非イオン界面活性剤、蛋白分解酵素、2-プロパノール
 ※製品の性質上、沈殿物が生じる場合があります。
 緩やかに転倒混和してご使用下さい。
 使 用 法／浸漬洗浄 2%～5%(10Lの水に200～500ml)



ムースハンド・S

●医薬部外品

商品コード	規 格	定 価	発注単位
05215	500ml	¥ 1,400	10
05035	4kg	¥ 5,600	4
01173	20kg	¥ 26,000	1

用途・特徴／皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果を有する手洗い洗浄剤です。天然植物油使用、アロエエキス(保湿剤)配合で手肌に優しい洗浄剤です。
 主 成 分／イソプロピルメチルフェノール※用途意外には使用しないで下さい。
 ●湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)などの皮膚刺激があるときは、悪化させる恐れがありますので使用しないでください。
 ●かぶれたり、刺激を感じたときには、使用を中止してください。
 使 用 法／適量を手に取り、よくなじませて洗浄した後、水で良く洗い流してください。



日立サンプルカップ

商品コード	規 格	定 価	発注単位
01304	5000個	¥25,000	1

適合機種／日立



サンプルカップ1.2ml

商品コード	規 格	定 価	発注単位
01338	2000個	¥16,000	1

適合機種／ベックマン



サンプルダブルカップ0.5ml

商品コード	規 格	定 価	発注単位
01339	2000個	¥16,000	1

適合機種／東芝・ベックマン




MKカップ2ml

商品コード	規 格	定 価	発注単位
01337	3000個	¥36,000	1

適合機種／日立

PS製沈査用スピッツ10ml

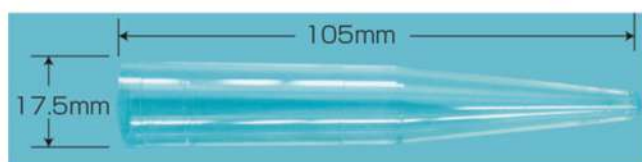


本体サイズ／17.5φ×105mm
 容量／10ml
 目盛線の分量／100μ、200μl、10ml

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01266	PS製沈査用スピッツ10ml	1000本	¥20,000	1
01267	PS製沈査用スピッツ10ml	2000本	¥36,000	1
01366	PS製沈査用スピッツ10ml黄キャップ入	1000本	¥28,000	2
01276	PS製沈査用スピッツ10ml黄キャップ装着	2000本	¥51,000	1
01268	PS製沈査用スピッツ10ml 5号スポイト入	1000本	¥30,000	1
01269	PS製沈査用スピッツ10mlスポイト入	1000本	¥28,000	1

適合キャップ／沈査用インキャップ黄

PP製沈査用スピッツ10ml

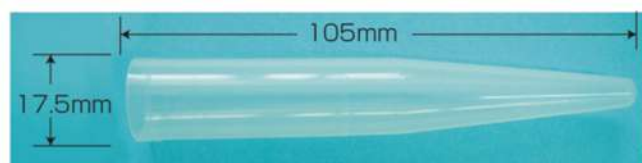


本体サイズ／17.5φ×105mm
 容量／10ml
 目盛線の分量／100μ、200μl、10ml

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01340	PP製沈査用スピッツ10ml	1000本	¥20,000	1
01341	PP製沈査用スピッツ10ml	2000本	¥36,000	1
01342	PP製沈査用スピッツ10ml黄キャップ入	1000本	¥28,000	2
01343	PP製沈査用スピッツ10ml黄キャップ装着	2000本	¥51,000	1
01344	PP製沈査用スピッツ10ml 5号スポイト入	1000本	¥30,000	1
01345	PP製沈査用スピッツ10mlスポイト入	1000本	¥28,000	1

適合キャップ／沈査用インキャップ黄


PS製スクリースピッツ

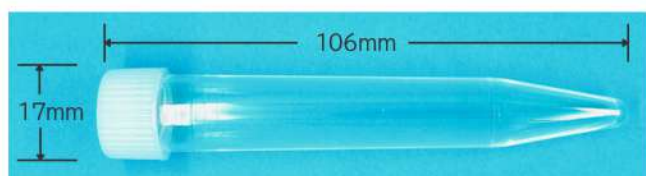

容量／10ml
スクリーキャップ付

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01449	PSスクリースピッツ白キャップ付	1000本	¥22,700	1

PP製スクリースピッツ

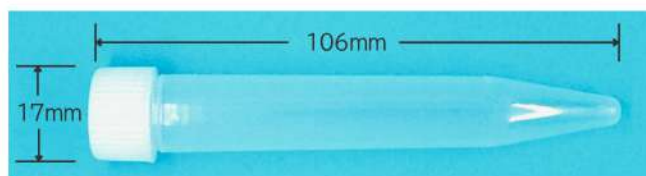


容量／10ml
スクリーキャップ付

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01451	PPスクリースピッツ白キャップ付	1000本	¥21,400	1

Category
10

分注用チップ


JMP-1600 μ Lチップ

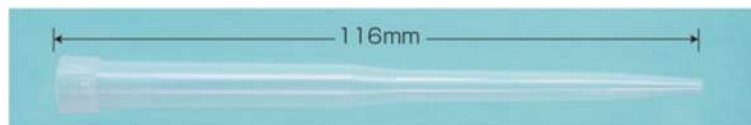

PP製
容量／16ml

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
00024	JMP-1600 μ Lチップ	4000本	¥48,000	1

テストチューブ12×75

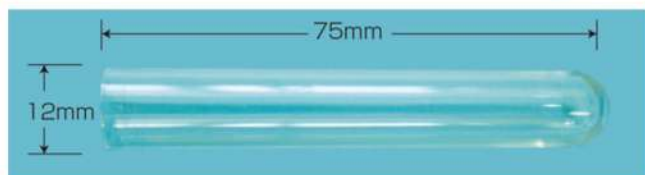


商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01326	PS製テストチューブ12×75	5000本	¥40,000	1


容量／4ml

適合キャップ／12用インキャップ

テストチューブ13×75

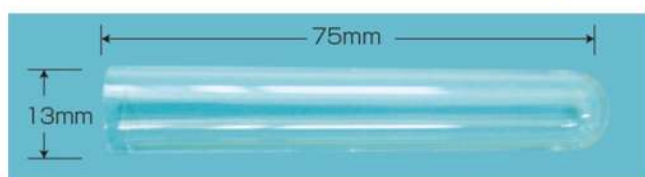

PS製

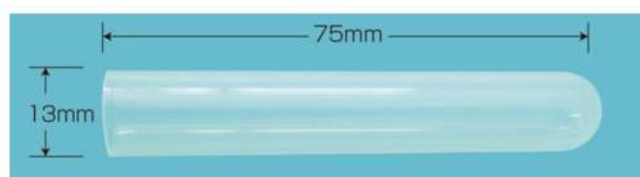


PP製

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01308	PS製テストチューブ13×75	4000本	¥32,000	1
01316	PP製テストチューブ13×75	4000本	¥32,000	1


容量／5ml

適合キャップ／13用インキャップ

NIR 微量チューブ

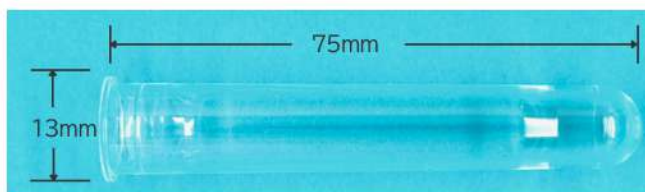

PS製

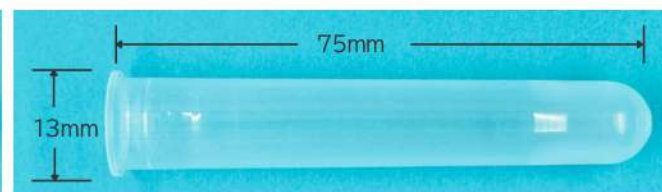


PP製

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01439	NIR 微量チューブPS	5000本	¥62,000	1
01438	NIR 微量チューブPP	5000本	¥62,000	1

容量／5ml

適合キャップ／NIR 微量チューブ用キャップ

テストチューブ13×100

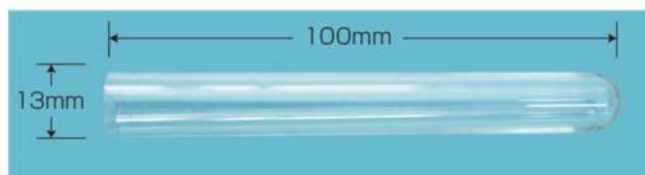


商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01255	PS製テストチューブ13×100	2000本	¥16,000	1

容量／8ml

適合キャップ／13用インキャップ

テストチューブ16×100

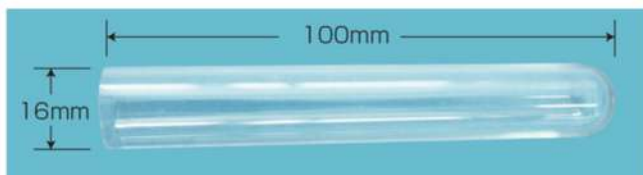


商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01322	PS製テストチューブ16×100	2000本	¥40,000	1
01332	PS製テストチューブ16×100ショートキャップ入	1000本	¥24,000	1
01331	PS製テストチューブ16×100ショートキャップ付	1000本	¥24,000	1

容量／10ml

適合キャップ／16用インキャップ・16用インショートタイプ

テストチューブ6ml(14.5×83)

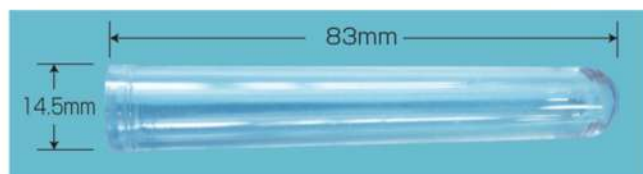

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01346	PS製テストチューブ6ml(14.5×83)	3000本	OPEN	1

容量／6ml

適合キャップ／13用インキャップ

Category
1 2

キャップ

沈渣用インキャップ黄



商品コード	規格	定価	発注単位
01270	5000個	¥35,000	1

PE製

適合タイプ／沈渣用スピッツ10ml

12用インキャップ



商品コード	規格	定価	発注単位
01293	5000個	¥45,000	1

PE製

適合タイプ／テストチューブ12×75

13用インキャップ



商品コード	規格	定価	発注単位
01350	5000個	¥45,000	1

PE製

適合タイプ／テストチューブ13×75
テストチューブ13×100
テストチューブ6ml(14.5×83)

16用インキャップ



商品コード	規格	定価	発注単位
01351	5000個	¥45,000	1

PE製

適合タイプ／テストチューブ16×100

16用インショートタイプ



商品コード	規格	定価	発注単位
01352	2000個	¥16,000	1

PE製

適合タイプ／テストチューブ16×100

NIR 微量チューブ用キャップ




商品コード	規格	定価	発注単位
01434	5000個	¥31,000	1

PE製

適合タイプ／NIR 微量チューブ


1mlスポイト2号

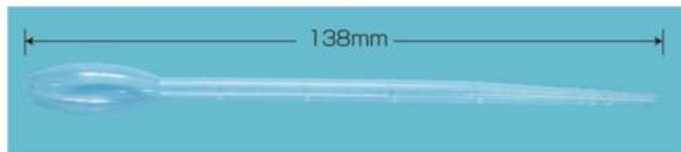

PE製(硬質)
容量/1ml
滴下量:約35 μ l
目盛:起点、15 μ l、30 μ 、250 μ 、500 μ 、750 μ 、1000 μ

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01271	1mlスポイト2号	2000本	¥14,000	1

1mlスポイト5号

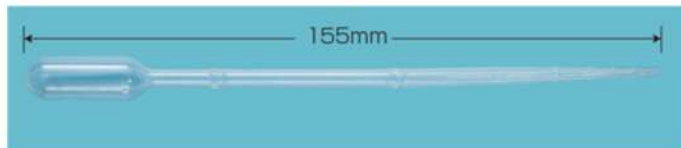

PE製(軟質)
容量/1ml
滴下量:約35 μ l
目盛:20 μ l、35 μ 、50 μ 、100 μ l、500 μ 、750 μ 、1000 μ l

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01249	1mlスポイト5号	2000本	¥14,000	1


2mlスポイト



PE製
容量/2ml
滴下量:約50 μ l
目盛:0.5~2.0ml(0.5ml単位)

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01347	2mlスポイト	2000本	¥12,000	1


2ml Lスポイト

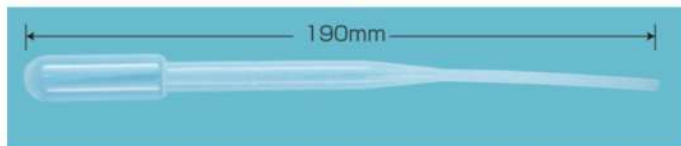

PE製
容量/2ml
滴下量:約50 μ l
目盛:100~300 μ 、0.5~2.0ml

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01348	2ml Lスポイト	2000本	¥20,000	1

3mlスポイト

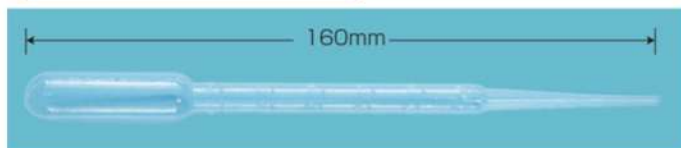

PE製
容量/3ml
滴下量:約50 μ l
目盛:0.5~3.0ml(0.5ml単位)

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01272	3mlスポイト	1000本	¥10,000	1
01273	3mlスポイト	2000本	¥16,000	1

3ml Bスポイト



PE製
容量/3ml
滴下量:約50 μ l
目盛:0.5~3.0ml(0.5ml単位)

商品コード	商品名	規格	定価	発注単位
01347	3ml Bスポイト	2000本	¥30,000	1



PS製



PP製

サンプル管30ml

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01354	サンプル管30ml PS	500個	¥20,000	1
01355	サンプル管30ml PP	500個	¥19,000	1

本体底径/27mm 高さ/52.5mm(蓋装着時)
キャップ径/34.5mm 目盛/無



PP製検体容器90ml

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01356	PP製検体容器90ml	200個	¥15,000	1

本体底径/51.6mm 高さ/65mm(蓋装着時)
キャップ径/58.2mm 目盛/10ml単位(20~90)



PP製検体容器120ml

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01357	PP製検体容器120ml	200個	¥17,000	1

本体底径/48mm 高さ/75mm(蓋装着時)
キャップ径/63.1mm 目盛/10ml単位

綿棒移送容器 Sコンテナ



PP製
本体全長/170mm
キャップ内側に綿棒を差し込む事が出来るよう穴が空いています。
※綿棒は含まれておりません。

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01333	Sコンテナ容器白	500個	¥22,500	1
01247	Sコンテナ滅菌個包装	200個	¥16,000	4
01353	Sコンテナ容器白滅菌50本包装	500個	¥27,500	1

● 遠沈管

コニカルチューブ50ml



PP製
目盛:5ml~47.5ml(2.5ml単位)

コニカルチューブ50ml自立型



PP製
目盛:5ml~50ml(5ml単位)

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01358	コニカルチューブ50ml	500本	¥35,000	1
01359	コニカルチューブ50ml自立型	500本	¥35,000	1

● 凍結保存チューブ

5mlアウター自立タイプ



PP製
目盛:1ml~4.5ml(100μ単位)

5mlインナー自立タイプ



PP製
目盛:1ml~4.5ml(100μ単位)

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01360	5mlアウター自立タイプ	500本	¥23,000	1
01361	5mlインナー自立タイプ	500本	¥23,000	1

1.8mlアウター自立タイプ



PP製
目盛:0.5ml~1.8ml(100μ単位)

1.8mlインナー自立タイプ




PP製
目盛:0.5ml~1.8ml(100μ単位)

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01362	1.8mlアウター自立タイプ	500本	¥23,000	1
01363	1.8mlインナー自立タイプ	500本	¥23,000	1

● 採便容器

採便容器

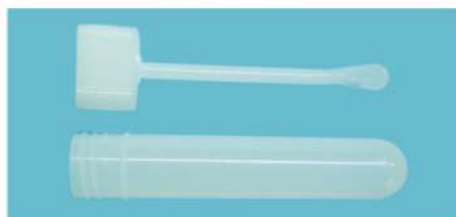

PP製

スリム採便管



PP製
キャリブレアー培地入

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01364	採便容器	1000本	¥35,000	1
01365	スリム採便管	1000本	¥35,000	1



サーマルロール紙

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
08904	JMP-感熱紙 58mm×25M	12巻	¥5,000	1
08905	JMP-感熱紙 110mm×30M	10巻	¥10,000	1
C0019	JMP-感熱紙 58mm×18M	12巻	¥9,300	1
08901	JMP-感熱紙 80mm×25M	10巻	¥13,000	1



手貼り用検体サーマルラベル

※注意点

純正品には、多くのサイズや特殊仕様、枚数違いの製品がございます。
販売に当たっては、サンプル等でのご確認をお願いいたします。

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
01417	手貼り用検体サーマルラベル【50×35 1,120枚】	10巻	¥50,000	1
01418	手貼り用検体サーマルラベル【50×32 1,170枚】	10巻	¥50,000	1
01419	手貼り用検体サーマルラベル【50×30 1,200枚】	10巻	¥50,000	1



分注機用ラベル

商品コード	商品名	規 格	定 価	発注単位
C0247	分注機用検体サーマルラベル32mm×50mm 10巻入(2000枚/巻)	1箱	¥120,000	1



心電図記録紙

お願い

1. 記録紙を暖房器具・アルコール・シンナーなどのそばに、放置・保存しますと、発色や退色することがあります。必ず50℃以下の場所に保存するようにしてください。
2. 日光が当たる場所に長時間放置しますと変色することがあります。
3. 軟質塩ビ製の書類ファイルを使用しますと、退色することがありますので、ポリエチレン・ポリプロピレン・硬質塩ビ製の書類ファイルなどを使用してください。
4. 記録結果に必要な事項を記入する場合、サインペンやマジックインクを使用すると、発色することがあります。

商品コード	商品名	規格	定 価	発注単位	製品規格	タイプ	紙厚	カルテ	方眼	梱包状態	備考
C1004	JOP-69TE	1巻	¥2,000	10	210mm×30m	ロール	薄口	×	○	1巻小箱入で10巻大箱	
C1010	JOP-358TE	1巻	¥1,600	10	145mm×30m	ロール	薄口	×	○	1巻小箱入で10巻大箱	
C1002	JOP-621TE	1冊	¥10,000	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	厚口	○	○	1冊小箱入で5冊大箱	
C2001	JOP-621TE300	1冊	¥18,600	5	210mm×300m	折畳:折幅295mm	厚口	○	○	1冊箱	
C2002	JOP-621TE 薄口カルテ無	1冊	¥10,000	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	薄口	×	○	1冊小箱入で5冊大箱	
C2003	JOP-621TE300 薄口カルテ無	1冊	¥18,600	5	210mm×300m	折畳:折幅295mm	薄口	×	○	1冊箱	
C2004	JOP-622TE	1冊	¥10,000	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	厚口	×	×	1冊小箱入で5冊大箱	
C2006	J210F60H05	1冊	¥6,000	10	210mm×60m	折畳:折幅150mm	薄口	×	○	1冊帯封で10冊大箱	
C2007	J210K60J05	1冊	¥7,400	10	210mm×60m	折畳:折幅300mm	薄口	○	○	1冊帯封で5冊大箱	
C2008	J145F60H05	1冊	¥4,000	10	145mm×60m	折畳:折幅150mm	薄口	×	○	1冊ビニール入で10冊大箱	
C2009	JFQW210-3-140	1冊	¥1,800	10	210mm×30m	折畳:折幅140mm	薄口	×	×	1冊ビニール入で10冊大箱	
C0119	JFQW210-10-295	1冊	¥5,400	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	薄口	×	×	1冊小箱入で5冊大箱	
C2011	JFQW210-10-295	1冊	¥16,800	5	210mm×300m	折畳:折幅295mm	薄口	×	×	1冊箱	
C2012	JFQB210-10-295 方眼無	1冊	¥8,400	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	厚口	○	×注	1冊小箱入で5冊大箱	
C0098	JFQS210-30-295	1冊	¥16,800	5	210mm×300m	折畳:折幅295mm	薄口	×	○	1冊箱	
C2014	JOP-622TE カルテ有	1冊	¥10,000	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	厚口	○	×	1冊小箱入で5冊大箱	受注生産品
C2015	JOP-623TE	1冊	¥10,400	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	薄口	×	×	1冊小箱入で5冊大箱	受注生産品
C2016	JFQB216-10B	1冊	¥8,000	10	216mm×100m	折畳:折幅300mm	厚口	○	○	1冊箱	受注生産品
C2017	JRQS145-6A	1巻	¥3,000	10	145mm×60m	ロール	薄口	×	○	1巻小箱入で5巻大箱	受注生産品
C2018	JFQB210-30-295 方眼無	1冊	¥18,600	10	210mm×300m	折畳:折幅295mm	厚口	○	×	1冊箱	受注生産品
C2019	JFQB210-30-295 方眼有	1冊	¥21,000	10	210mm×300m	折畳:折幅295mm	厚口	○	○	1冊箱	受注生産品
C2020	JOP-621TE カルテ無	1冊	¥9,000	10	210mm×100m	折畳:折幅295mm	厚口	×	○	1冊小箱入で5冊大箱	受注生産品
C2021	JFQW210-30-295 特用	1冊	¥13,000	20	210mm×300m	折畳:折幅295mm	薄口	×	×	1冊箱	受注生産品
C2022	JOP-618TE	1冊	¥2,000	10	210mm×30m	折畳:折幅145mm	薄口	×	○	1冊ビニール入で10冊大箱	受注生産品
C1104	JOP-382TE	1冊	¥2,500	10	145mm×20m	折畳:折幅75mm	薄口	×	○	1冊ビニール入で10冊大箱	受注生産品
C0123	JRQS210-6-295	1巻	¥4,000	10	210mm×60m	ロール	薄口	×	○	1巻小箱入で5巻大箱	受注生産品

受注生産品の納期は、弊社受注日より約4週間程度頂戴しております。

注:稀に方眼有りの商品がございますので、弊社営業担当にお問合せください。



日本メディポート株式会社

〒005-0004

札幌市南区澄川4条1丁目1-40 ジンバル澄川4F-B

TEL 011-299-6711 FAX 011-299-6712

URL <http://www.jmp-inc.jp/>

代 理 店